

旋转混合器

旋转混合器，驱动主机，STR4

- 高度万用性——接受任意五种转桶的一种
- 内置计时器
- 可变旋转速度控制，6-60转/分

STR4型旋转混合器驱动主机可连接不同规格的磁鼓，不同规格的磁鼓适于不同大小和不同类型的瓶子，其运动方式也不相同。6-60rpm的转速满足不同的混合应用。内置模拟式计时器计时范围10-60分钟。

技术参数

产品编号	STR4
旋转速度	6-60rpm
规格 (W×D×H)	650×250×250mm
净重	6.4kg
电源/功率	230V/50Hz,50W
转桶/附件	需单独另外订购


订货编号

型号	产品描述
STR4	旋转混合器主机驱动器，滚筒以及支架需单独订购

滚筒支架以及转桶试管支架附件

订货编号

产品编号	产品描述
STR4/1	试管支架转桶
STR1/1	∅12mm×12个用试管夹，一对/包装
STR1/2	∅16mm×10个用试管夹，一对/包装
STR1/3	∅9mm×8个用试管夹，一对/包装
STR1/4	∅24mm×7个用试管夹，一对/包装
SW2/1	备用支架，60×1.5ml

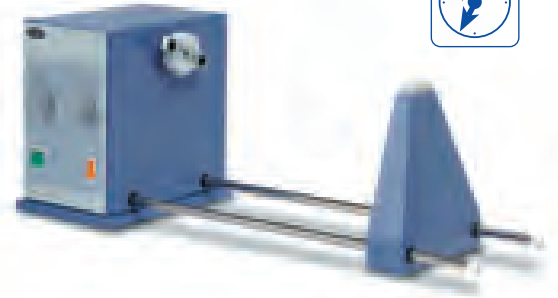

STR4



STR4 加 STR4/1

转桶,双平台支架,STR4/2

STR4/2型转桶设计为2个250ml圆底烧瓶或试剂瓶的上下旋转运动混合，其采用颈圈套在烧瓶或试剂瓶的瓶颈处，然后用2个垫圈固定。

技术规格

型号	SI19
STR4/2	转桶, 双平台支架



STR4 加 STR4/2

转桶,8向运动支架,STR4/3

STR4/3型转桶设计为将容器成45°放置，同时提供滚动和上下旋转运动等8向剧烈混合，其采用Velcro®固定带固定样品容器，适用于几乎所有的容器，包括试剂瓶、粉末罐和油漆桶等，规格达200mm长、120mm直径的任何容器。

订货编号

型号	产品描述
STR4/3	8向运动支架转桶



STR4 加 STR4/3

旋转混合器

转桶,摇篮支架,STR4/4

STR4/4型转桶由4部分Perspex® 摇篮组成, 每个部分采用Velcro® 固定带固样品容器, 规格达300mm长、120mm直径的任何容器。

技术参数

产品编号	SB2
STR4/4	摇篮支架转桶

转桶,微量离心管支架, STR4/5

STR4/5型设计为1.5ml微量离心管的上下旋转运动混合, 包含四个支架的转桶, 每个支架可放置60支微量离心管, 适用于高通量的样品处理

订货编号

产品编号	产品描述
STR4/5	四部分摇篮和四个管架的支架转桶



STR4 加 STR4/4



STR4 加 STR4/5